

Incubadora de transporte para terapia intensiva

La Incubadora de Transporte Medix TR-306 le ofrece al bebé un ambiente térmico estable y seguro en situaciones críticas. Ha sido diseñada para proporcionar un entorno de terapia intensiva durante el traslado dentro y fuera del hospital.



Máximo acceso y rendimiento

Su doble capota de acrílico minimiza la pérdida de calor mientras permite gran visibilidad del neonato durante el transporte. Los sensores de aire y de piel posibilitan un monitoreo confiable de la condición térmica del bebé. Su puerta frontal rebatible, sus 6 portillos y la posibilidad de deslizar el colchón hacia afuera, ofrecen un rápido acceso al recién nacido.


Fácil de usar y configurar

El panel de control es muy amigable. Provee toda la información crítica a través de un display simple y fácil de interpretar, permitiendo a médicos y enfermeras concentrar sus esfuerzos en el cuidado del bebé y no en el manejo del equipo.

La Incubadora de Transporte Medix TR-306 cuenta con un carro plegable y espacio para incorporar tubos de aire y oxígeno. Puede ser operada con 12VCC o conectada a la red de corriente alterna. Las baterías internas ofrecen hasta 4 horas de autonomía.

De ser necesario, un sistema de regulación de humidificación y equipamiento adicional como monitores, respiradores y bombas de infusión, pueden ser incorporados a la incubadora, dependiendo de las necesidades clínicas de cada recién nacido.



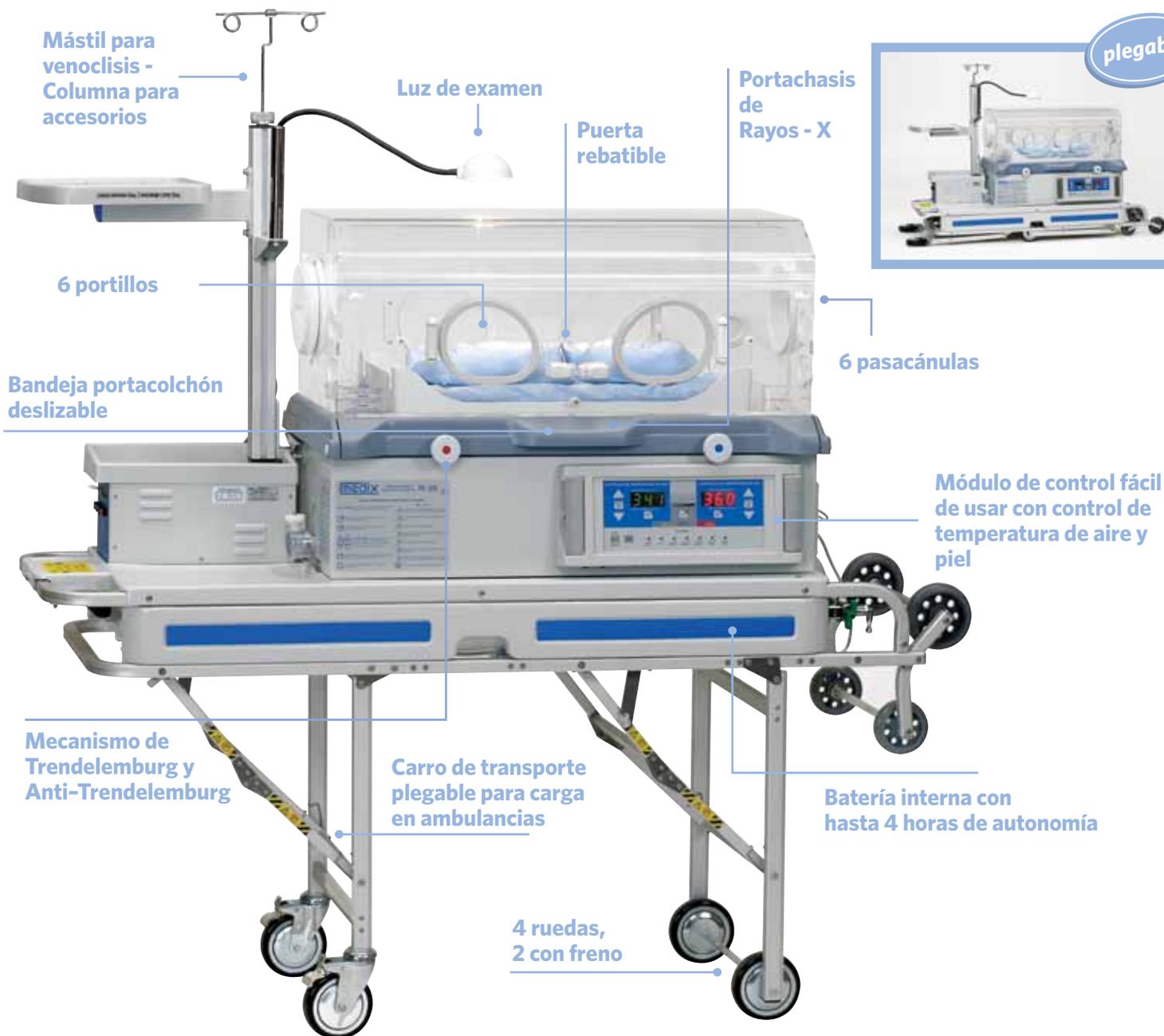

Facilidad de limpieza

El diseño simple de la Incubadora de Transporte Medix TR-306, permite realizar una limpieza efectiva en forma rápida, preparándola para su siguiente uso en muy poco tiempo.

Alta resistencia al uso

La Incubadora de Transporte Medix TR-306 proporciona un diseño sólido y resistente a un bajo costo de adquisición y mantenimiento, ofreciendo eficiencia para el transporte dentro y fuera del hospital.

P/N 008626A