


Medix MediLED mini

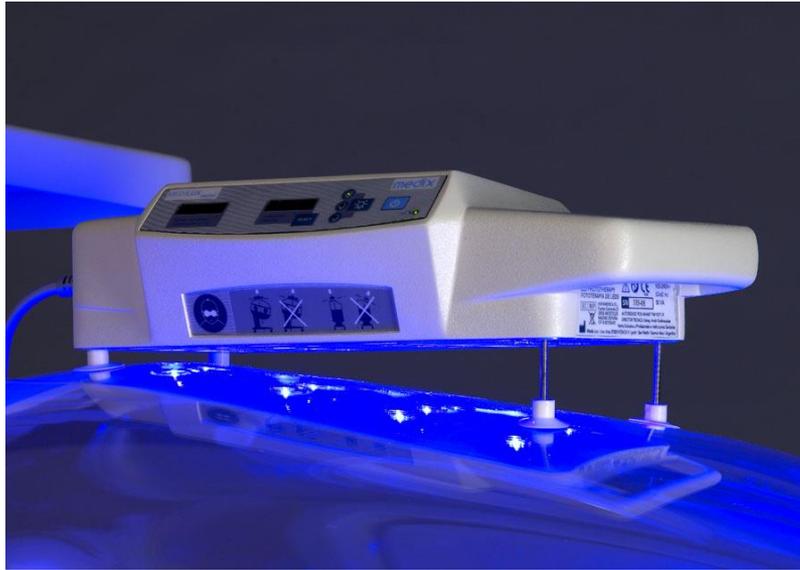

Fototerapia de LEDs en un diseño compacto.

La MediLED mini puede ser colocada sobre la capota de una incubadora o en una Cuna Térmica SM-401

La Degradación Mas efectiva de la Bilirrubina¹

El Sistema de MediLED Mini proporciona:

Fototerapia intensiva por miles de horas

- Emite luz azul en un espectro de de 450-470 nm. Este rango corresponde con el pico de absorción (458 nm) en el cual la molécula de bilirrubina se degrada.
- Diseño exclusivo para Incubadoras y Cunas térmicas Medix
- Se puede colocar fácilmente sobre incubadoras y cunas térmicas, ideal para ser utilizada en espacios reducidos.
- 3 niveles de intensidad diferentes
- Brazo opcional para utilizar en cunas térmicas

Seguridad

Los Leds azules no emiten luz ultravioleta (UV) y reducen la probabilidad de daño a la piel.

- Los LEDs azules no emiten Radiación infrarroja (IR) reduciendo el potencial riesgo de pérdida de líquido.